

Evakuierung... von adipösen Personen



Was ist eine Escape-Mattress®?

Mit einer Escape-Mattress® Bariatric kann eine hilfsbedürftige und adipöse Person (bis zu 300KG Traglast) in liegender Position über Treppen und Flure in Sicherheit gebracht werden. Die Escape-Mattress® Bariatric muss von mehreren Pflegekräften oder Evakuierungshelfern betrieben werden.

Wie funktioniert die Escape-Mattress®?

Die Escape-Mattress® Bariatric ist als Schleifmatratze zu nutzen (Bedienung erfolgt durch mehrere Helfer mittels der Zugbänder).


Die Escape-Mattress® Bariatric ist an den Längsseiten mit 12 Tragegriffen ausgestattet. Hierdurch ist die Matratze theoretisch ebenfalls als Tragematratze einsetzbar. Natürlich auch für Wendeltreppen geeignet.

Vorteile der Escape-Mattress®:

- TÜV zertifiziert bis zu 300KG
- extra breite Version
- hergestellt mit hochwertigen Materialien (Brandschutzklasse M2).
- extra lange Zugbänder zur rückschonenden Evakuierung.
- die Griffe erleichtern das seitwärts manövrieren.
- Blut-, urin- und laugenbeständig.
- das Tragen von Personen ist nicht mehr notwendig.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- sichere Evakuierung über die Treppen.
- man bestimmt selbst die vakuierungsgeschwindigkeit.
- passt in jeden Evakuierungsplan.
- CE zertifiziert.

UNSERE EMPFEHLUNG:

Wir empfehlen den Einsatz der Escape-Mattress® Bariatric, wenn sich hilfsbedürftige adipöse Personen im Gebäude befinden, die liegend evakuiert werden müssen. Die Escape-Mattress® Bariatric ist ebenso geeignet für Wendeltreppen..

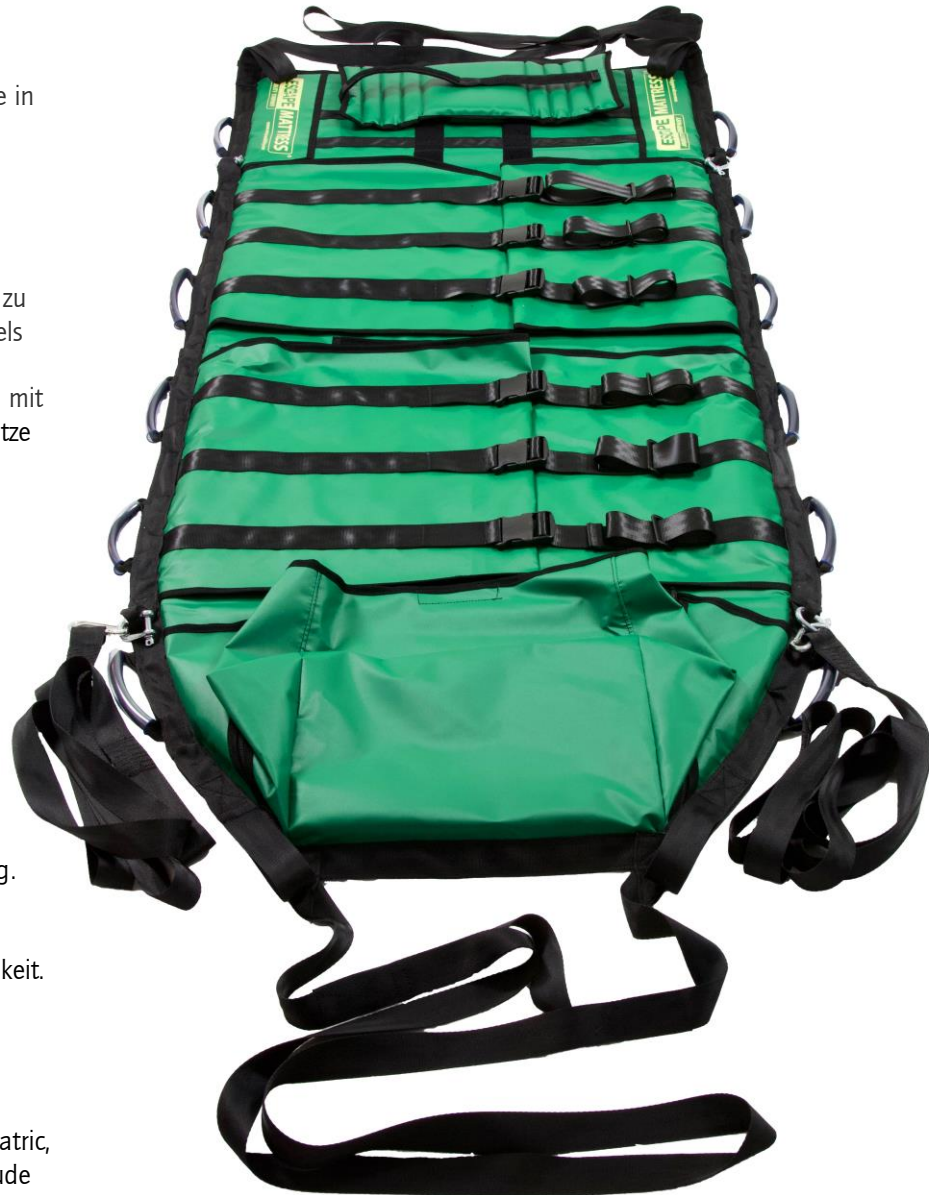



Spezifikationen	Escape-Mattress® Bariatric	CE
Artikelnummer:	21080	
Abmessungen (Länge x Breite x Dicke):	ca. 200 x 86 x 2 cm	
maximale Traglast:	300 kg	
Gewicht:	ca. 10 kg inkl. Aufbewahrungstasche	
vorab kostenlose Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓	
Ausgestattet mit zusätzlichen, extra langen Zugbändern:	✓	
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	
man bestimmt selbst die Evakuierungsgeschwindigkeit:	✓	
blut-, urin- und laugenbeständig:	✓	
Brandschutzklasse M2:	✓	
ausgestattet mit Kopfstütze, body-flaps & Fußsack:	✓	
inkl.. Aufbewahrungstasche:	✓	
Garantie:	2 Jahre	

Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.

