

...Ihr Weg zur Sicherheit



i-bsp

SICHERHEIT PRODUKTE  
BERATUNG PRÄVENTION

Escape-Mattress® SOLO/FOLD/COMPACT

## Evakuieren... in liegender Position

### Was ist eine Escape-Mattress®?

Mit einer Escape-Mattress® kann eine hilfsbedürftige Person in liegender Position über Treppen und Flure in Sicherheit gebracht werden. Die Escape-Mattress® ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wodurch für jede Situation eine Lösung geboten werden kann.

### Wie funktioniert die Escape-Mattress®?

Die Escape-Mattress® Modelle sind als Schleifmatratzen zu benutzen (Bedienung erfolgt durch 2 Personen mittels der Zugbänder). Alle Escape-Mattress® Modelle sind an den Längsseiten mit Tragegriffen ausgestattet. Hierdurch sind Sie ebenfalls als Tragematratzen einsetzbar.

### Vorteile der Escape-Mattress®:

- hergestellt mit hochwertigen Materialien (Brandschutzklasse M2).
- extra lange Zugbänder zur rückschonenden Evakuierung.
- die Griffe erleichtern das seitwärts manövrieren.
- Blut-, urin- und laugenbeständig.
- das Tragen von Personen ist nicht mehr notwendig.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- sichere Evakuierung über die Treppen.
- man bestimmt selbst die Evakuierungsschnelligkeit.
- ermöglicht eine fließende Räumung.
- passt in jeden Evakuierungsplan.
- CE Zertifiziert.

### UNSERE EMPFEHLUNG:

Wir empfehlen den Einsatz der Escape-Mattress®, wenn sich hilfsbedürftige Personen im Haus befinden, die liegend evakuiert werden müssen. Ebenfalls ist sie ideal geeignet für den Einsatz auf Wendeltreppen.

**ESCAPE MATTRESS®**  
MOBILITY COMPANY



...Ihr Weg zur Sicherheit



**i-bsp**

SICHERHEIT PRODUKTE  
BERATUNG PRÄVENTION


Modell Solo

Modell Fold

Modell Compact



Spezifikationen	Escape-Mattress® Solo	Escape-Mattress® Fold	Escape-Mattress® Compact
Artikelnummer:	21020	21010	21030
Abmessungen (Länge x Breite x Dicke):	ca. 200 x 68 x 8 cm	ca. 200 x 68 x 8 cm	ca. 200 x 68 x 6 cm
maximale Traglast:	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht:	ca. 9.5 kg inkl. Hülle	ca. 7.2 kg	ca. 7.5 kg inkl. Tasche
vorab kostenlose Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓	✓	✓
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	✓	✓
man bestimmt selbst die Evakuierungsschnelligkeit	✓	✓	✓
Brandschutzklasse M2	✓	✓	✓
ausgestattet mit Kopfstütze, body-flaps & Fußsack :	✓	✓	✓
blut-, urin- und laugenbeständig	✓	✓	✓
auch in schmaler Ausführung (55 cm breit) lieferbar:	✓	✓	-
faltbar:	-	✓	-
aufrollbar:	-	-	✓
inkl. Aufbewahrungstasche/-hülle	✓	optional	✓
Garantie:	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

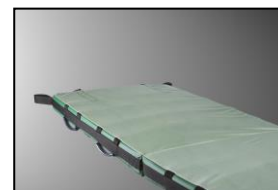

Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten  
Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.

